



XP-300™

Analizator Hematologjik i Automatizuar

I fortë dhe i besueshëm



XP-300 – I fortë dhe i besueshëm

I saktë dhe i besueshëm

- Fuqia Sysmex për kohën më të mirë të mundshme
- Teknologji e provuar për saktësinë e rezultateve
- Lineariteti për të mbështetur diagnostikimin dhe monitorimin
- Shenja dallueser për të mbështetur diagnozën nga mjeku

Teknologji inovative

- Kryen analiza të shpejta dhe të sakta të një CBC me 20 parametra
 - Përfshirja e një diferenciali WBC me 3 pjesë me një Count Absolute Neutrophil (ANC)
 - Histograma për RBC, WBC dhe PLT
 - Shpërndarës automatik
- Prodhon rezultate të sakta të krahasueshme me analizatorët e hematologjisë Sysmex

Kompakt dhe plotësisht i integruar

- Përmasa të vogla
- Përshtatet lehtësisht në banakët e laboratorit
- Ideal si backup për analizatorët Sysmex të serisë XS dhe serisë XN

I thjeshtë për të punuar dhe mirëmbajtur


- Kërkohet trajnim minimal
- QC dhe reagentë me barkode
- Ndezje dhe fikje automatike

I sigurtë

- Sistemi jo-toksik, reagent i biodegradueshëm
- Dy reagentë (hollues dhe lizant) për të gjitha rezultatet

Aftësi për tu lidhur në rrjet

- Transferim të dhënash LIS përmes LAN (TCP/IP) ose Portës seriale (RS-232C)
- Ndërfaqe dy-drejtimëshe

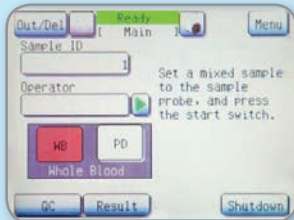

Menuja intuitive e ekranit me prekje thjeshton funksionimin



Të dhënat QC janë në dispozicion në aparat me raporte gjithëpërfshirëse dhe gjithashtu në dispozicion përmes Insight™ programit të kontrollit të cilësisë.

Sysmex Corporation
1-5-1-Wakinohama-Kaigandori
Chuo-ku, Kobe 651-0073,
Japan Tel. +81 (78) 265-0521
www.sysmex.co.jp

Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1
22848 Norderstedt
Germany
tel://49-40-527-260

SWISSMED Sh.p.K. Laboratory
Solutions Rruga "Don Bosko" Kompleksi
"Nord Konstruktion"
Kati 1 Shk3, Ap 3 - TIRANA
Phone: + 355 4 2420443
<http://www.swissmed-al.com>



XP-300™ Specifikimet

Rezultate që mund ti besoni!



Beso në Sysmex për të bërë më shumë se thjesht të flasësh për automatizimin.

Për të parë të gjitha që ofron Sysmex, dhe atë që konsumatorët janë duke thënë, shko në www.sysmex.com/delivers

Auto Analizatori Hematologjik XP-300

Principet e detektimit	<i>RBC, PLT</i> Metoda e detektimit me ndryshim potencialit <i>WBC</i> Metoda e detektimit me ndryshim potencialit <i>HGB</i> Metoda pa cyanide <i>HCT</i> Metoda e përcaktimit të lartësisë së impulsit kumulativ
Parametrat	Gjak komplet dhe Me hollim; 20 parametra WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT; LYM#; LYM%; MXD#; MXD%; NEUT#; NEUT%; RDW-SD; RDW-CV; MPV; PDW; P-LCR; PCT
Histogramat	<i>WBC, RBC, PLT</i>
Volumi i punës	60 mostra në orë
Volumi i mostrës	Gjak komplet 50 µL Me hollim 20 µL
Ruajtja e të dhënave	40,000 rezultate së bashku me histogramat
Kontrolli i kualitetit	2 QC programe: Levey-Jennings; <i>X-barM</i> file control charts 6 QC file për të gjithë parametrat Sysmex <i>EIGHTCHECK®-3WP</i> <i>X-TRA</i> Quality Assurance Program
Lineariteti i Gjakut komplet	<i>WBC</i> 1.0 – 99.9 x 10 ³ /µL <i>RBC</i> 0.30 – 7.00 x 10 ⁶ /µL <i>HGB</i> 0.1 – 25.0 g/dL 10.0 <i>HCT</i> – 60.0% <i>PLT</i> 10 – 999 x 10 ³ /µL
Nr i mostrës.	Deri në 15 karaktere alfanumerike
Opsionet periferike	Printer standart i inkorporuar Host computer Ethernet (TCP/IP), RS-232C Barkod reader dore Printer grafik
Softuer disa gjuhësh	Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Spanjisht, Italisht, Portugalisht, Japonisht, Kineze, Indoneziane, Koreane, Rusisht
Përmasat / Pesha	42 x 48 x 36 cm/ 30 kg
Reagentët	CELLPACK 10L STOMATOLYSER - WH (3*500ML)
Ekrani	LCD me ngjyra me prekje
Specifikimet e Barkodeve	ITF, NW-7, CODE 39, CODE 128, JAN-8, JAN-13

Sysmex Corporation
1-5-1-Wakinohama-Kaigandori
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan
Tel. +81 (78) 265-0521
www.sysmex.co.jp

Sysmex Europe GmbH
Bornbarch 1
22848 Norderstedt
Germany
tel://49-40-527-260

SWISSMED Sh.p.K. Laboratory Solutions
Rruga "Don Bosko" Kompleksi "Nord
Konstruksion"
Kati 1 Shk3, Ap 3 - TIRANA
Phone: + 355 4 2420443
<http://www.swissmed-al.com>